

USER **MANUAL**

www.anymi.co.kr



A stylized illustration of a blue lily flower with large, pointed petals and several buds on thin stems. The flower is set against a light blue background with soft, abstract shapes. There are some white starburst effects on the petals. A smaller, partially visible blue lily flower is on the right side of the image.

お買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証はおしつけ日・販売店名」などの記入を確かめ
- 取扱説明書とともに大切に保管してください。

タイトル	PAGE
安全上のご注意	2
使用上のお願い	2
各部のなまえ	2
使用前の準備	2
お手入れの流れ	2
お手入れできる部分	2
お手入れの周期、時間の目	2
使用方法	2
掃除のしかた	2
ランプカートリッジの交換	2
レベルの設定方法	2
故障かな?と思ったら	2
商品仕様	2
保証とアフターサービス	2
商品保証書	2

安全にお使い頂くため、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
本製品を取扱説明書に記載されている以外の目的で使用しないでください。

本製品は安全性に万全を期して設計されておりますが、ご使用になる前には
「安全上のご注意」を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は人への危害や損害を未然に防止するため
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 使用上の注意事項	
 使用禁止	* ベースメーカー等の体内埋込型医用電子機器 * 人工心肺等の生命維持用医用電子機器 * 心電計等の装着型医用電子機器 * その他、体内に装着している医用電子機器
 必ず守る	電源プラグにほこりが付着しないようの定期的に掃除する。
	電源は、正しく配線された交流100Vのコンセントを必ずご使用ください。 火災や感電・けがの恐れがあります。
	濡れた手で電源プラグ、本製品に触れないでください。損傷・異常のある電源プラグ、コード及び本製品は使用しないでください。感電・ショート・発火の恐れがあり、たいへん危険です。
 必ず守る	通電中はタオル・毛布等を本製品にかけないでください。 感電・ショート・発火の恐れがありたいへん危険です。
 電源プラグを抜く	ご使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源プラグを抜くときには、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
 使用禁止	* 過去に皮膚ガン、または皮膚の悪性腫瘍を患ったことのある方。 * 脱毛部位に湿疹、外傷、あるいはヘルペスなどの活動性感染症がある方。 * 糖尿病やその他の全身性疾患、代謝性疾患を患って皮膚状態が正常でない方。 * 1ヶ月以内に強い太陽光を受けられたり、日焼けをされた方。 * 光線過敏症を引き起こす可能性のある医薬品、ハーブ、ローション等を6週間以内に使用された方。 * ステロイド剤を常用されている方。 * ポルフィリン症、日光過敏症などの光過敏症の方。 * 施術部位に入れ墨や黒い点など肌の色以外の濃い色素がある方。
 使用禁止	* 38℃以上の有熱性疾患の方。 * 血圧異常をお持ちの方。 * 急性疾患、伝染病疾患、結核性疾患の症状をお持ちの方。 * 悪性腫瘍の症状をお持ちの方。 * 妊娠中の方や出産直後の方および授乳中の方。 * ケロイド体質や傷跡になりやすい方。 * その他身体に異常のある方。 ※上記に挙げた疾病以外で現在療養中、治療中の方は医師と相談してください。 * ほくろ（緑や青がかったもの）も含めて、あざ、イボや炎症等異常のある箇所。 * 性器周辺等敏感な箇所。 * 心臓及びその近くの箇所。



使用上の注意事項



必ず守る

次のような方は必ず医師にご相談の上、ご使用ください。

- * 皮膚病やかぶれやすい方、物理的刺激に弱い方。
- * アレルギー体質の方。
- * 皮膚疾患のある方。
- * アトピー性皮膚炎の方。
- * 循環機能、内蔵機能の弱い方。
- * 15歳以下の子供の方。
- * 上記に挙げた方以外で体質等に問題のある方。



必ず守る

* 肌が弱い方

ご使用の前に肌テストを行ってください。ご使用の前に手の甲や腕の内側等の敏感な部位に照射し10分後に皮膚の反応を確認してください。照射された部位に火傷を負ったり水泡が出たりその他の異常を感じた場合は使用しないでください。肌テストは必ずレベル1から行い、使用するエネルギーレベルを上げた後は必ず肌テストを行ってください。

テスト前に必ず本書を読み正しい使用を理解してください。

※万一お肌に異常がある時は、すぐに使用を中止し医師にご相談してください。



本体の取扱いは次の事項を必ず守って下さい。



禁止

本製品を使用する場合は、必ず保護用ゴーグルを着用してください。

* 本製品を自分や周囲にいる人の目に向けて使用しないでください。

照射部であるランプカートリッジから出る光を直接見ないでください。反射光も直視しないでください。失明する恐れがあります。

本製品を使用する前に必ずランプカートリッジを確認してください。

ランプカートリッジに茶色もしくは黒色の斑点で汚れが付着している場合や破損している場合は、ランプカートリッジを交換してください。

* 火傷をしったり皮膚を傷める恐れがあります。

レンズ面を強く押さえないでください。

* 破損して肌を傷つける恐れがあります。レンズが破損している場合は使用を中止してください。

本製品は高圧部品を内蔵しておりますので、ラジオやテレビに雑音が入ったり、電子機器を使用した電機製品に影響与えることがありますので、使用時間をずらしたり別の部屋で使用してください。



禁止

本製品や電源プラグに水をかけたり、水に浸したりしないでください。

また、お風呂やシャワー等の水のかかる場所での使用、保管はおやめください。

万一、水や他の液体に濡れたときは、すぐ電源プラグを抜いてください。



禁止

お客様の手の届くところに保管しないでください。

事故やトラブルの原因となる恐れがあります。

高温、多湿、ほこりの多い場所、直射日光のあたる場所での使用または放置しないでください。

不安定な場所に置かないでください。また、落としたり、ぶつけたりしないでください。

本製品は家庭用脱毛器です。業務用や人体の脱毛以外での目的で使用しないでください。

業務用で使わないでください。故障の原因になります。



禁止

本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障の時は、ご購入先または当社までご連絡ください。発火・異常動作・事故・故障・けがの原因になります。

その表示と意味は次のようになっています。

 危険	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
 警告	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示します。
 注意	取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

● 絵表示の例

 禁止図記号	製品の取り扱いにおいてその行為を禁止する記号
 注意図記号	製品の取り扱いにおいて発火、破裂、高温に対する注意を喚起するための図記号
 指示図記号	製品の取り扱いにおいて指示に基づく行為を強制する図記号



次の事項を必ず守ってください。

本製品では次のような症状が生じる場合があります。

裏面のきらりん美肌レベルチェックシートを確認の上肌色レベルにあったレベルでご使用下さい。

※ 使用方法を誤ると火傷や水ぶくれが生じる場合があります。

※ 使用中、処理した部位に熱さやヒリヒリ感、かゆみ、痛みを感じることがあります。

使用直後や24時間以内に処理した部位が赤くなったり腫れたりする場合は使用を中止し2日たっても炎症が続く場合には、皮膚科医に相談してください。

守らないと炎症が悪化する原因になります。

※ 使用直後に皮膚の色が濃くなる(色素沈着)ことがあります。

使用中に痛みやヒリヒリ感を感じた場合、または処理後、皮膚が赤く熱をもったような状態になった場合すぐに冷たいタオルや氷などで、処理した部位を冷やしてください。

外出時には必ず日焼け止めクリーム(SPF)などで紫外線を遮断してください。

本製品を使用するにあたり、次のような症状をはじめとする肌トラブルが生じた場合は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。

※ 火傷や水ぶくれが生じた場合

※ 処理部位の赤みが続き、かゆみなどが生じた場合

※ 色素沈着が長期間に及んだ場合

本製品の使用にあたりご不明な点や問題点などがございましたら、カスタマーサービスセンターまで御連絡ください。


付属品がすべて揃っているか損傷がないかを確認してください。

[標準セット]


- ① 本体：1台
- ② カートリッジ：脱毛ランプ 1個
- ③ 電源コード：1本
- ④ 取扱説明書(保証書 1 部)
- ⑤ 保護用ゴーグル：1 個
- ⑥ オプション：子供脱毛専用小ランプ・ニキビケアランプ・シミケアランプ




① IPL 本体

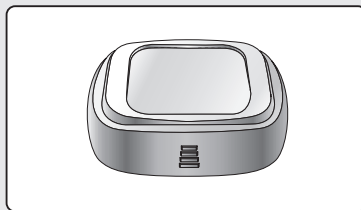


② 脱毛ケア用ランプカートリッジ

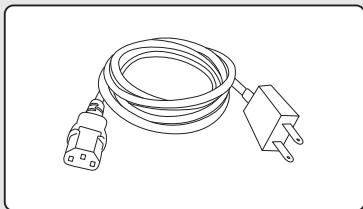


③ 電源ケーブル

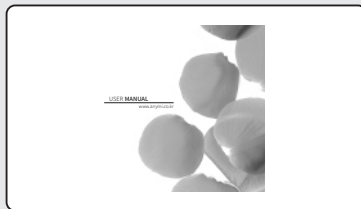


④ 取扱説明書

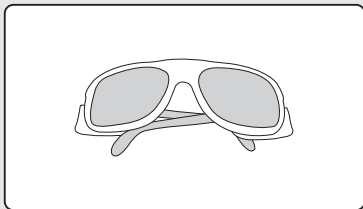


⑤ UV 断用ゴーグル

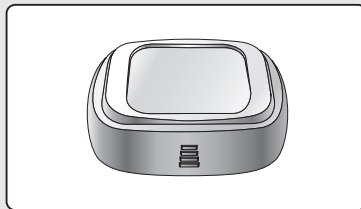


⑥ オプション

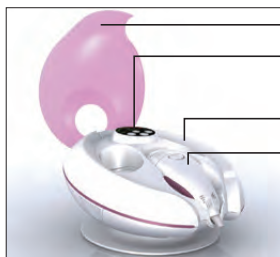


- 1 カバー
- 2 コントロールパネル
- 3 本体
- 4 プローブヘッド

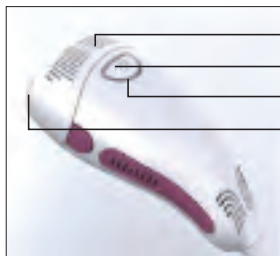

- 1 ランプカートリッジ
- 2 チャージランプ
- 3 フラッシュボタン
- 4 スキンセンサー

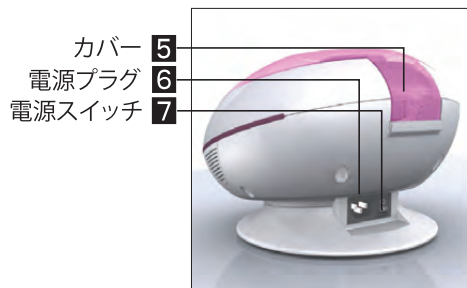

- カバー 5
- 電源プラグ 6
- 電源スイッチ 7

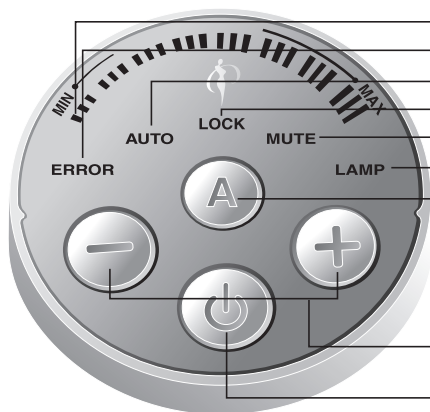

- 1 レベル
- 2 エラーランプ
- 3 オートショットランプ
- 4 ロックランプ
- 5 ミュートランプ
- 6 カートリッジ交換催促ランプ
- 7 オートショットボタン
- ※ボタンを押さなくても照射出来ます。
- 8 レベルアップボタン
- 9 電源ボタン又はミュートボタン
- ※2秒長押しで電源が入ります。


- 光エステする部位の毛をきれいにシェービングします。
 - シェービング後、毛が皮膚に残らないようにきれいにふき取ってください。
- ※ 光エステしたい部位にローションや冷却ジェルなどを塗らないでください。
(故障の原因になります)

[準備する]


1. 箱から本体を取り出します。



2. プローブにご希望のランプカートリッジを装着してください。
3. ランプの上部の穴に合わせて挿入してください。

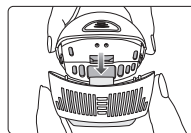


4. ランプカートリッジがプローブに正常に装着されていることを確認してください。

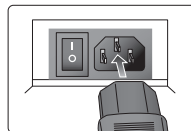


5. コードをコンセントに差し込み、本体裏面の主電源を入れてください。

I:電源ON O:電源OFF

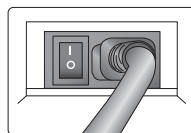

6. 目の保護のため付属ゴーグルを必ず着用してください。

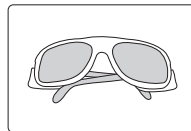

初めて使用するときは、1か所に照射したあと肌に異常がないか様子を見てから光エステを続けてください。

1 肌の水分や汗をふき取る



ローションや乳液、パウダー、制汗剤などは
つけず、肌を清潔で乾燥した状態にする。
※ 発光面（レンズ）が汚れると、効果が出ない
場合があります。

2 専用シェーバーで除毛する



3 光エステする




4 肌をクールダウンさせる




肌のほてりが気になる場合はお手入れした
箇所に冷たくしたタオルなどをあて、冷やし
化粧水などをつけて保湿する

同じ箇所に1日2回以上は光エステしないでください。


※1回の使用中に、照射範囲が多少重複しても問題ありません。

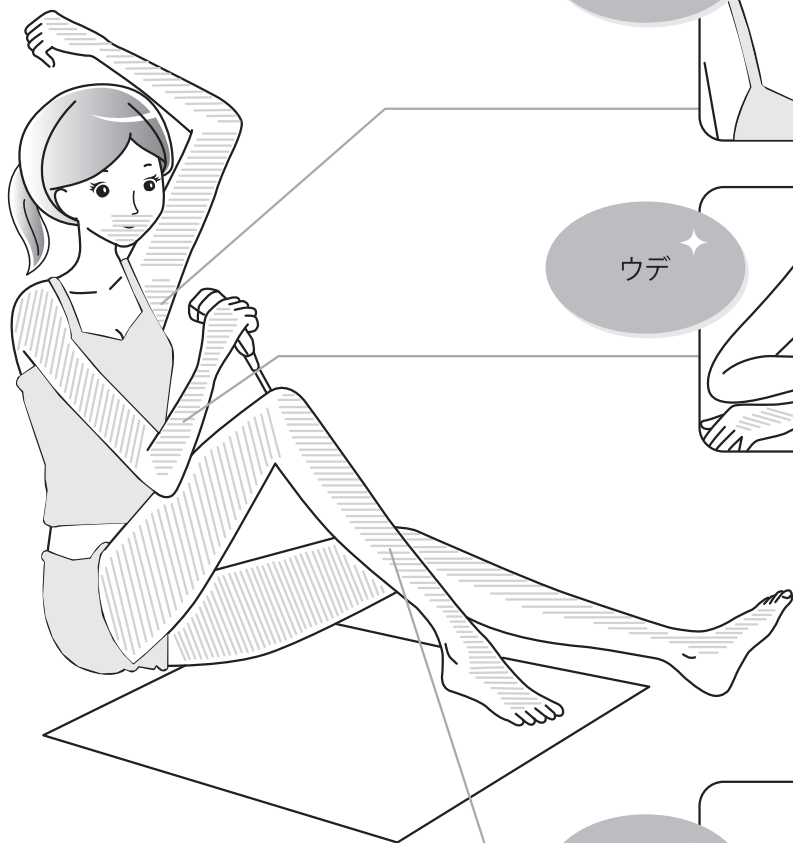

ワキ

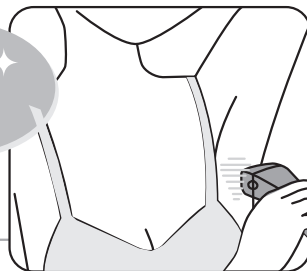

ウデ

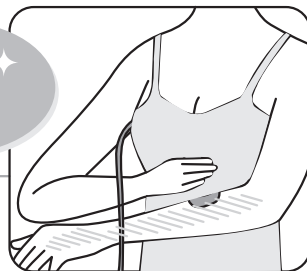

アシ

