


간편 사용설명서

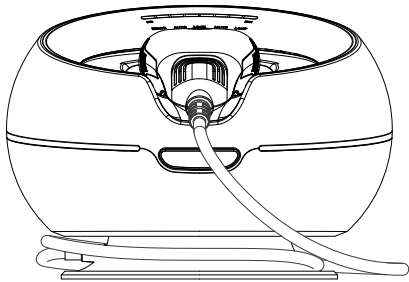

Personal ipl

Model name
PL-3000



www.ilwooelectron.com

사용 전 준비사항 및 조작부 설명


사용 전 준비사항

1. 해당기기는 동일한 사용자가 조작 및 시술이 가능한 장비입니다.
2. 사용 전 원하는 부위에 모발을 깨끗이 제거 하여 주십시오. (사용하기 24시간 전) 단, 모발이 없는 경우 효과가 제한적이니 털을 뽑지 마십시오.
3. 제거 후 모발이 피부에 남지 않게 깨끗이 씻은 후 건조시켜 주십시오.
4. 모발을 제거하지 않고 사용할 시에는 효과가 반감될 수 있습니다.
5. 선선한 환경(18~24℃)에서 사용하여 주십시오.
6. 편안한 복장과 자세에서 사용하여 주십시오.


시술 부위에 로션이나 냉각 젤 등을 바르면 고장의 원인이 됩니다.
단, 냉찜질용 얼음을 별도로 준비하시어 시술할 부위에 냉찜질을 한 다음에 조사하시면 더 안전합니다.

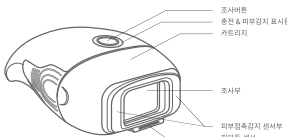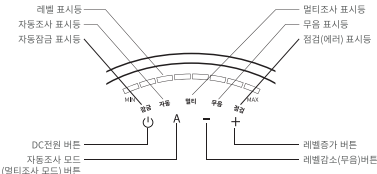

카트리리지 교환방법 및 종류

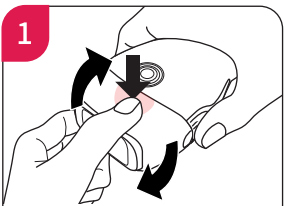


프로브 양쪽면을 누르고 카트리리지의 상·하를 가볍게 누른 후 당겨 주시면 카트리지가 탈착 됩니다.

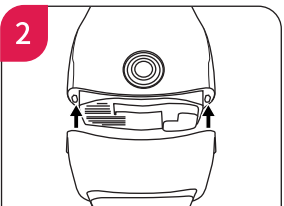


다른 용도의 카트리지로 교환하여 프로브 홀에 맞게 장착합니다.

카트리리지의 종류

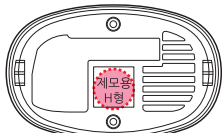

▶ 제모용 카트리리지 (H형)
제모에 효과적인 카트리리지입니다.

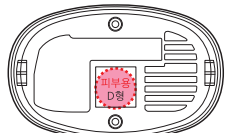

▶ 피부용 카트리리지 (A형, D형)
피부질환에 효과적인 카트리리지 입니다.

TIP 전용 카트리리지

맞춤형 전용 코팅필터로 피부자극이나 착색,부작용에 대한 위험을 줄이고 제모와 피부개선에 최적화 된 파장을 극대화 시켜 안전한 시술이 가능함

안전을 위한 주의사항

금지



- 아래와 같은 체내 이식용 의료기기(Implantable Device)를 이식한 분께서는 기기에 오작동을 초래할 우려가 있기 때문에 반드시 사용을 금지 하여 주십시오.
- 페이스메이커 등 체내 이식된 의료용 전자기기
 - 인공 심장등의 생명 유지용 의료용 전자기기
 - 심전계 등의 장착형 의료용 전자기기
 - 기타 체내에 장착하는 의료용 전자기기
 - 이 기기의 변경은 허용되지 않습니다.

위험




- 아래의 경우에는 사용하지 않도록 주의 하시기 바랍니다.
- 과거에 피부암 또는 피부 악성 종양증을 앓았던 경우
 - 광 과민성 유발 의약품 등을 6주 이내에 사용한 경우
 - 과거 3개월 이내에 방사선치료 또는 화학치료를 받은 경우
 - 시술부위에 문신이나 검은점 등 피부색 이외의 질은 색소가 있는 경우
 - 혈압에 이상이 있는 경우
 - 당뇨병, 급성질환, 전염성질환, 결핵성질환의 증상을 가진 경우
 - 임신중인 분이나 출산 직후의 임신부인 경우
 - 피부질환(아토피성 피부염, 염증 등)이 있거나 알레르기 체질인 경우
 - 19세 이하인 경우
 - 해수욕이나 선풍기 후 일주일 이내 또는 일광욕 후 아픈 피부인 경우
 - 염증, 상처, 데인자국, 습진 등 피부 문제가 있는 경우
 - 상처 주변 등 민감한 부위의 경우
 - 심장 및 심장에 가까운 부위인 경우
 - 근육의 외상 같은 병으로 인하여 염증을 일으키거나 부어 오른 곳인 경우
 - 화농성 여드름 부위인 경우
 - 피부톤이 어두운 쪽에 가까운 경우 (26쪽의 Skin Tone 참조)
 - 라식/라섹수술 직후인 경우 (전문의와 상의 후 사용)

자세한 설명 및 주의사항은 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

Model name PL-3000 www.ilwooelectron.com

사용준비 및 일반조사

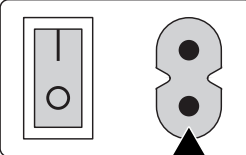
1


AC전원스위치


플러그를 콘센트에 꽂으시고 뒤쪽에 AC 전원스위치를 눌러 주십시오.

2


전원 버튼(⏻)을 2초간 가볍게 눌러 주십시오.

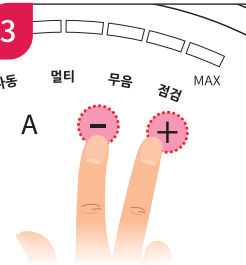
3


(-) , (+) 버튼을 동시에 2초간 눌러 잠금기능을 해제합니다.

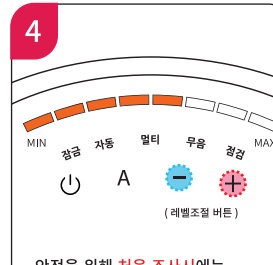4


안전을 위해 처음 조사시에는 1 ~ 5레벨 까지만 조사가 되며, 1회 조사 후에는 1 ~ 8 레벨로 조정하여 사용할 수 있습니다.

일반멀티 (4연속조사)

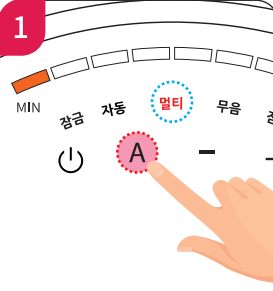1


일반모드에서 (A) 버튼을 2초간 누르면 멀티조사 모드가 됩니다.

2


멀티조사모드는 1 ~ 8단계까지 사용 가능합니다.


3


멀티조사 모드를 해제하고 싶은 경우 (A) 버튼을 다시 누르면 해제 됩니다.

TIP 멀티조사란?

일반조사의 출력을 4번 나누어 조사함으로써 민감한 피부 자극을 줄여 부작용과 거부감을 줄일 수 있는 기능입니다.

자동 (버튼을 누르지 않아도 조사가 됨)

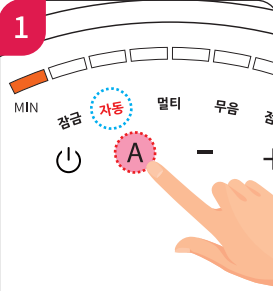1


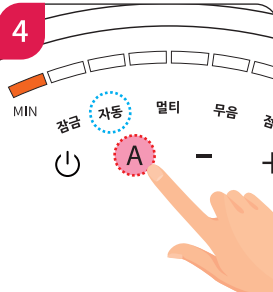
일반모드에서 (A) 버튼을 1초이내 누르면 자동조사 모드가 됩니다.

2


자동조사모드는 5단계까지만 자동조사가 됩니다.


3


자동조사모드 5단계에서 레벨증가 (+) 버튼을 누르면, 점검 표시등이 점등됩니다.

4


자동조사 모드를 해제하고 싶은 경우 (A) 버튼을 다시 누르면 해제됩니다.

자동멀티 (버튼을 누르지 않아도 4연속조사)

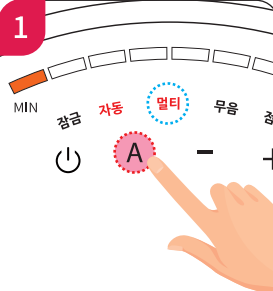1


자동모드에서 (A) 버튼을 2초간 누르면 멀티조사 모드가 됩니다.

2


자동멀티조사모드는 5단계까지만 자동조사가 됩니다.

3


자동멀티조사모드 5단계에서 레벨증가 (+) 버튼을 누르면, 점검 표시등이 점등됩니다.

4


자동멀티조사 모드를 해제하고 싶은 경우 (A) 버튼을 다시 누르면 해제됩니다.