




ANYMI SONIC


제품설명서



기기 본체

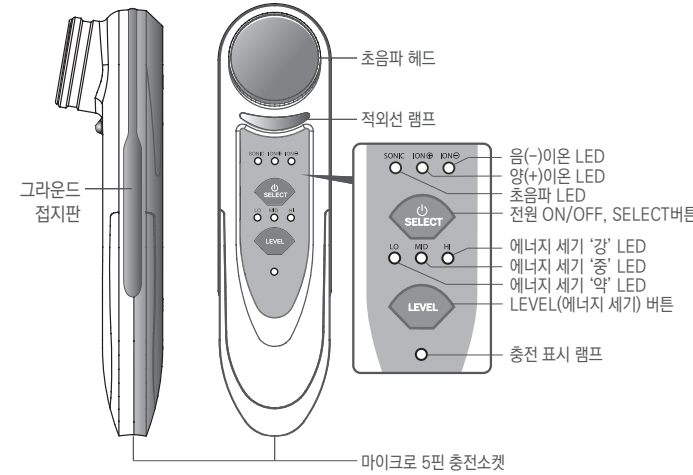

AC 어댑터(마이크로 5핀)

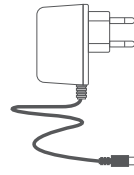

코튼(화장솜)링



제품특징

- 얼굴에 알맞은 헤드 면적**
얼굴 마사지에 알맞은 헤드 면적으로 고르게 사용할 수 있습니다.
- 초음파 1MHz 용량**
초음파의 1초 100만 번 미세 진동으로 관절 및 어깨 근육 등의 통증 완화에 효과적으로 사용할 수 있습니다.
- 장시간 사용 가능**
1회 충전으로 초음파 연속 사용 약 1시간, 이온 연속 사용 약 7시간 사용할 수 있습니다.
- 안전한 디자인**
사용자 자신에게만 동작되도록 자기접지 기능이 있습니다.
- 사용시간 제한 전원 자동 OFF 기능**
얼굴 전체 사용 시간은 약 10분이며, 12분 후에는 전원이 자동 OFF됩니다.
- 안전 알림 기능**
보다 건강한 피부를 위하여 초음파 및 이온 기능 사용시 한곳에서 10초이상 머물면 알림이 울립니다.
이때 위치를 이동하면 좋습니다.



제품성능

초음파란?

1MHz(1초에 100만번)의 미세 진동으로 피부를 건강하게 가꿔주는데 도움을 주며 온열작용의 도움으로 건강한 피부를 유지시켜 주는데 도움을 줍니다.

이온도입법이란?

이온도입법 (iontophoresis, iontransfer)은 직류전류를 이용해서 약물 이온을 피부 또는 점막을 통해 신체 안으로 침투시키는 방법입니다.
이온으로 피부 장벽을 일시적으로 느슨하게 하여 이온화 한 성분을 피부 내부까지 침투될 수 있도록 작용합니다.
비타민 C 계열의 미용액 등을 사용하면 보다 효과적입니다.

시험으로 입증된 ANYMI SONIC의 성능

시험기관 : 원광보건대학
시험기간 : 2007. 3. 26 ~ 2007. 4. 9
시험결과 : 전류 특성 확인 결과 단상 직사각형파가 출력되어 이온도입이 가능한 전류라고 판단됨.

안전을 위한 주의사항

초음파 기기의 과도한 사용은 건강을 해칠 수 있습니다.

- 자기접지(그라운드 접지)를 손으로 잡고 헤드가 피부에 닿아야 기기가 동작됩니다.
- 헤드를 피부 한 곳에 오래 고정하지 마시고 반드시 부위별로 움직이며 사용하세요.
 - 초음파 진동을 사용할 땐 한 곳에 10초 이상 사용을 금합니다.
예민한 피부 또는 신체 부위에서는 레벨(에너지세기)는 반드시 약(LO)에 놓고 사용하며, 짧은시간 사용하세요.
 - 음(-)이온, 양(+이온)기능에선 피부 한 곳에 10초 이하로 머물며 위치 이동하며 사용하세요. 10초 초과 사용하면 건강에 해로울 수 있습니다.
- 기기를 사용한 후에는 물기를 완전히 닦아 내고 건조한 후에 보관하여주세요.
- 플러그를 콘센트에서 분리할 때 전선을 잡아 당기지 마세요.
- 헤드에 묻은 이물질은 바로 닦아 주세요.
- 기기 및 코드에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 초음파 기기에 충격을 가하거나 던지지 마세요.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 50분 정도 충분히 충전해서 고온을 피해 보관해주세요.
- 과방전을 위해 6개월에 한 번정도는 충전을 해주세요.
- 헤드터리 노화는 보증 대상이 아닙니다.
- 본 제품의 배터리는 만충전 또는 방전 상태로 방치하면 성능 노화가 발생할 수 있습니다.

충전방법

- 본체 아래에 있는 AC어댑터 충전 소켓에 어댑터를 끼웁니다.
- 어댑터 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 충전 램프가 적색에서 녹색으로 바뀌면 충전이 완료된 것입니다.
- 충전이 완료되면 플러그를 콘센트에서 뽑습니다.
- 충전을 하면서 기기를 사용하지 마세요. 충전 어댑터에 미용액이나 화장수가 흘러 기기 고장이나 감전의 원인이 됩니다.
- 처음 사용할 때에는 반드시 충전을 하고, 장기간 사용하지 않을 경우에는 충분히 충전해서 고온을 피해 보관해주세요.

품질보증서

제품명	초음파 마사지기
보증기간	구매일로부터 1년
구매일	년 월 일
구입처	구매일을 반드시 적어주세요. 구매일 미기재시 무효가 될 수도 있습니다.

보증기간 내에 사용설명서 및 주의사항에 따라 정상적으로 사용하다 고장이 난 경우 보증규정에 의해 무료로 A/S 해드립니다.

유상서비스 : 보증기간 중이라도 아래의 경우 유상서비스입니다.

- 사용자의 취급 부주의(낙하, 침수, 파손 등)로 고장이 발생한 경우
- 사용중에 일어난 외관 변화(긁힘, 변색 등)의 경우
- 주의사항을 지키지 않아 고장난 경우
- 임의로 분해, 개조한 경우
- 본 보증서를 제시하지 않거나 구매일이 없는 경우
- 가정용 이외(예를 들면 업무용) 용도로 사용한 경우
- 어댑터 및 소모품
- 화재/지진/수해/낙뢰/그외의 천재지변에 의한 고장인 경우

제조원 (주)푸로맥스
경기도 부천시 오정구 산업로7번길 21 9층 (일우빌딩)
TEL: (02) 839-2011 www.pmkor.com

판매원 (주)애니미
경기도 부천시 원미구 신흥로 170, 상가5동 213호 (중흥, 워브더스테이트)
TEL: 1800-6240 www.anymi.co.kr


고객 서비스 센터 : 1800 - 6240



기타 사용 요령

① 초음파(SONIC) 기능

- 클렌징 용품으로 꼼꼼하게 화장을 지워주세요.
- 토너를 얼굴 전체에 발라주세요.
- 헤드에 평소 사용하는 젤을 적당히 올려주세요.
- SELECT 버튼을 1회 누르면 SONIC에 램프가 켜지고 초음파 진동을 시작합니다. (사용하지 않으면 1분후 자동꺼짐)
- LEVEL 버튼으로 '강/중/약'을 선택합니다. (민감피부인 분은 '약(LO)'을 선택해주세요.)
- 피부 안쪽에서 바깥쪽으로 또는 아래에서 위로 나선을 그리듯 문지르세요. (한곳에 머무르지 마세요.)
- 얼굴 전체 사용 시간은 약 5~10분 정도입니다. (12분 후에 자동으로 동작이 OFF 됩니다.)
- SELECT 버튼을 2초 정도 누르면 OFF 됩니다. (기기를 사용하지 않으면 1분 후 자동으로 OFF됩니다.)
- 사용한 후 기기에 묻은 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.

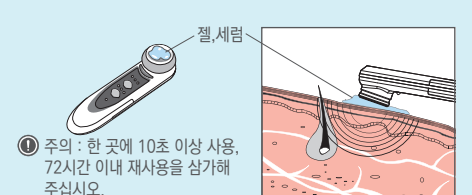

② (+)이온 기능(클렌징)

- 화장솜을 코튼링으로 고정시킨 후 물 또는 클렌징제품을 조금씩 적셔주세요.
- SELECT 버튼을 2번 누르면 'ION+'에 램프가 켜지고 이온 출력을 시작합니다.
- LEVEL 버튼으로 '강/중/약'을 선택합니다. (민감피부는 '약(LO)'을 선택해 주세요.)
- 화장솜을 피부에 가볍게 대고 한 곳에 10초씩 머물면서 사용합니다. (10초마다 '빠-빠-' 소리를 알려줍니다.)
- 얼굴 전체 사용 시간은 약 10분 정도입니다. (12분 후에 자동으로 동작이 OFF 됩니다.)
- SELECT 버튼을 2초 정도 누르면 OFF 됩니다. (기기를 사용하지 않으면 1분 후 자동으로 OFF됩니다.)
- 사용한 후 기기에 묻은 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.



③ (-)이온 기능(이온도입)

- 화장솜을 코튼링으로 고정시킨 후 비타민C제품 또는 미백제품을 조금씩 적셔주세요.
- SELECT 버튼을 3번 누르면 'ION-'에 램프가 켜지고 이온 출력을 시작합니다.
- LEVEL 버튼으로 '강/중/약'을 선택합니다. (민감피부는 '약(LO)'을 선택해 주세요.)
- 화장솜을 피부에 가볍게 대고 한 곳에 10초씩 머물면서 사용합니다. (10초마다 '빠-빠-' 소리를 알려줍니다.)
- 얼굴 전체 사용 시간은 약 10분 정도입니다. (12분 후에 자동으로 동작이 OFF 됩니다.)
- SELECT 버튼을 2초 정도 누르면 OFF 됩니다. (기기를 사용하지 않으면 1분 후 자동으로 OFF됩니다.)
- 사용한 후 기기에 묻은 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.



④ 초음파 + (-)이온(이온도입 촉진)

- 화장솜을 코튼링으로 고정시킨 후 비타민C제품 또는 미백제품을 조금씩 적셔주세요.
- SELECT 버튼을 4번 누르면 'SONIC'과 'ION-'에 램프가 켜지고 이온 출력을 시작합니다.
- LEVEL 버튼으로 '강/중/약'을 선택합니다. (민감피부는 '약(LO)'을 선택해 주세요.)
- 화장솜을 피부에 가볍게 대고 한 곳에 10초씩 머물면서 사용합니다. (10초마다 '빠-빠-' 소리를 알려줍니다.)
- 얼굴 전체 사용 시간은 약 10분 정도입니다. (12분 후에 자동으로 동작이 OFF 됩니다.)
- SELECT 버튼을 2초 정도 누르면 OFF 됩니다. (기기를 사용하지 않으면 1분 후 자동으로 OFF됩니다.)
- 사용한 후 기기에 묻은 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.



⑤ 기타 사용 요령

- 주의 : 한 곳에 10초 이상 사용, 72시간 이내 재사용을 삼가해 주십시오.
- 주의 : 코튼(화장솜)은 전철이 빠지지 않는 것을 사용
- 주의 : 코튼(화장솜)은 전철이 빠지지 않는 것을 사용

제품정보

본 제품은 공산품 인증(KC)을 받은 제품으로 의료기기가 아닙니다. 과도한 사용은 부적절한 결과를 초래할 수 있으니 하루 2회 이상 (연속사용금지), 1주일에 3회 이상 사용하지 마십시오.

제품명 : 초음파 마사지기
모델명 : ANYMI SONIC
본체크기 : 156(L) x 41(W) x 42(H) mm
본체무게 : 119 g
충전시간 : 최대 3시간
사용시간 : 초음파 약 1시간, 이온 약 7시간
어댑터입력 : AC 100 ~ 240 V (50/60 Hz)
어댑터출력 : DC 5 V, 700 mA

- * 본 제품은 예고없이 변경될 수 있습니다.
- * 어댑터는 제조사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- * 충전 및 사용시간은 주변환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- * 작성일 : 2015년 11월 30일

보관방법

- 통풍이 잘되고 습하지 않으며 유해 화학성분이 없는 곳에 보관.
- 직사광선이 없는 곳에 보관.
- 소비자 권장 보관온도 5~35°C, 소비자 권장 보관습도 20~80%