

reevaa

User Manual

본제품을 구입해주셔서 진심으로 감사합니다.
본제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위하여 사용전 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.
설명서를 읽고 난 후에는 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

reevaa Brand Stroy



늘 아름다운 피부를 간직할 수는 없을까?
잡티와 트러블 없이 깔끔한 피부를 가질 수는 없을까?
리바는 고민하고 연구했습니다.

리바는 피부 톤을 개선하고 탄력을 깨우려면 화장품의 유효성분을
피부 속 깊이 침투시켜야 한다는 것에 초점을 두었습니다.

그래서 리바는 온열과 초음파 이온을 동시에 발생시켜 효과를 극대화할 수
있고, 한 헤드로 냉 마사지까지 구현되는 특허제품을 만들었습니다.

이제 다시 태어나는 아름다움을 자신에게 선물하세요.

reevaa 

리바S 효과적인 사용 방법


- STEP 1** 클린 모드에서 온열로 피부 모공을 열고 갈바닉으로 각질을 정돈한 후
- STEP 2** 뉴트리션 모드에서 온열과 초음파, 갈바닉 으로 화장품을 흡수시켜 주고
- STEP 3** 부스트 모드에서 쿨링기능과 갈바닉으로 모공을 닫아 피부를 진정시키고 탄력에 도움을 줍니다.

각 부분의 명칭

구성품



본체

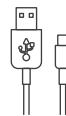

USB Cable




사용설명서




사용방법 [사용순서에 맞게 사용하세요]

STEP 1 CLEAN 모드(HOT & ⊕ION)

CLEAN 모드는 1단계 35℃ → 2단계 37℃ → 3단계 39℃ 온열기능으로 모공을 열어주고 ⊕ION이 노폐물을 배출하는데 도움을 줍니다.

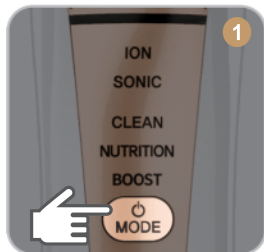

MODE 버튼을 2초 정도 누르시면 전원이 켜지고 ION 과 CLEAN 이 점등됩니다.

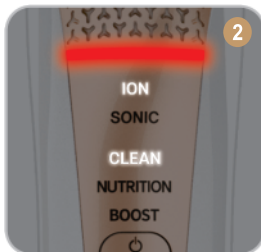

ION 과 CLEAN 이 점등되고, 상태 LED가 빨간색으로 점등되었는지 확인합니다.



그림과 같이 클렌징을 합니다. 12분 후에는 자동으로 OFF 됩니다.



레벨버튼을 누르시면 CLEAN 파워가 올라갑니다.




MODE 버튼을 누르시면 다른 MODE로 변경됩니다.


※ 얼굴전체 사용시간은 10분 이하를 권장 합니다.

STEP 2 NUTRITION 모드(HOT & SONIC & ⊖ION)

NUTRITION 모드는 1단계 37℃ → 2단계 39℃ → 3단계 41℃의 온열기능으로 모공을 열어주고 초음파와 ⊖ION 이 유효한 성분을 피부속 깊숙히 전달하여 주는데 도움을 줍니다.

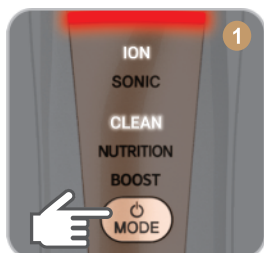

CLEAN 모드 상태에서 MODE 버튼을 한번 더 누르면 ION, SONIC, NUTRITION 이 점등됩니다.

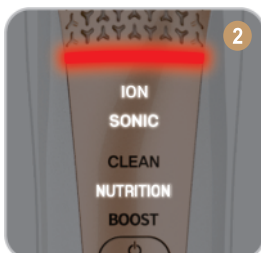

ION, SONIC, NUTRITION 이 점등되고, 상태 LED가 빨간색으로 점등되었는지 확인합니다.



그림과 같이 클렌징을 합니다. 12분 후에는 자동으로 OFF 됩니다.



레벨버튼을 누르시면 NUTRITION 파워가 올라갑니다.



MODE 버튼을 누르시면 다른 MODE로 변경됩니다.


※ 얼굴전체 사용시간은 10분 이하를 권장 합니다.

※ 사용 시 사용 환경 및 다수의 조건에 따라 위 온도와 상이 할 수 있습니다.

사용방법 [사용순서에 맞게 사용하세요]

STEP 3 BOOST 모드(COOL & ⊕ION & ⊖ION)

BOOST 모드는 약12℃의 쿨링 기능으로 모공을 닫아주고 ⊕ION과 ⊖ION이 탄력과 피부를 진정시키는데 도움을 줍니다.

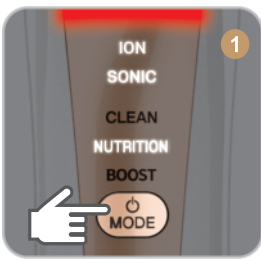



 레벨버튼을 누르시면 BOOST 파워가 올라갑니다.

 MODE 버튼을 누르시면 다른 MODE로 변경됩니다.

NUTRITION 모드에서 MODE 버튼을 누르면 한번 더 ION, BOOST 가 점등됩니다.

ION, BOOST가 점등되고, 상태 LED가 파란색으로 점등 되었는 지 확인 합니다.

그림과 같이 마사지를 합니다. 12분 후에는 자동으로 OFF 됩니다.

※ 얼굴전체 사용시간은 10분 이하를 권장 합니다.

※ 사용 시 사용 환경 및 다수의 조건에 따라 위 온도와 상이 할 수 있습니다.

청소 및 보관방법

제품의 세척

- 헤드는 사용 후에 마른 수건이나 화장솜으로 닦아 보관해 주세요.
- 헤드 위, 헤드 뒷면 그리고 하단 밑면의 환기팬 부분(제품의 열 방출)으로 물이 들어가지 않게 주의해 주세요.

제품의 보관방법

- 통풍이 잘되고 습하지 않으며 유해 화학성분이 없는 곳에 보관해 주세요.
- 습도가 높지 않은 곳이나 직사광선이 없는 곳에 보관하여 주세요.

보관 및 운송조건		작동(사용환경)조건	
보관온도	-10~60℃	작동온도	5~35℃
습 도	10~90%RH	습 도	20~80%RH
상대압력	50~106kPa	기 압	70~106kPa

안전을 위한 주의사항

사용시 주의사항

- 기기를 사용한 후 화장품이나 물기를 완전히 닦아 내고 건조한 후에 보관하여 주세요.
- 헤드에 묻은 이물질은 바로바로 깨끗이 닦고, 고온을 피해 보관해 주세요.
- 고장이나 비정상적인 반응이 발생하는 경우 사용을 즉시 중지하세요.
- **임플란트나 치아보철장치 부위는 피해주세요.**
- **페이스메이커, 산소공급기, 심전계 등 의료전자 장비와 함께 사용하지 마세요.**
- 기기 및 케이블에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- 기기에 충격을 가하거나 던지지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않을 경우 배터리의 수명과 방전 보호를 위해 6개월에 한 번 정도 충전을 해주세요.

이런 피부에 사용하세요!

- + 화장품이 겹도는 느낌이 드는 피부
- + 건조하고 지친피부
- + 울긋불긋한 피부
- + 보습이 필요한 피부
- + 탄력이 떨어져 점점 늘어지고 있는 피부
- + 피부가 칙칙해서 화장을 해도 밝지 않은 피부

이런 분들은 사용을 피하시기 바랍니다!

- 피부 출혈이나 피부질환 환자, 또는 알레르기가 있으신 분
- 사용부위에 수술, 상처 혹은 염증이 있는 환자
- 고혈압 증상, 혈우병 및 심장질환 환자, 생리 중인분, 임산부
- 체내 매입형 의료용 기기, 인공심폐 등의 생명 유지용 전자기기, 심전계 등의 장착형 의료용 전자기기 등을 사용하시는 분
- 어린이나 노약자가 혼자서 직접 사용하지 않도록 하세요.
- 멍이 들기 쉬운분
- 의사를 표현할 수 없는 분, 마비 및 지각장애가 있는 분
- 골질환이 있는 분

A/S 보증서

제품명 : reevaa S
보증기간 : 구입일로부터 1년
구매일 :
구입처 :

보증기간 내에 사용설명서 및 주의사항에 따라 정상적으로 사용하다 고장이 난 경우 보증규정에 의해 무료 로 A/S 해드립니다. 보증규정상 유상서비스에 해당하는 경우 유상으로 A/S 해드립니다.

유상서비스 : 보증기간 중이라도 아래의 경우 유상서비스 입니다.

1. 사용자의 취급 부주의 (낙하, 침수, 파손 등)로 고장이 발생한 경우
2. 사용중에 일어난 외관 변화(긁힘, 변색 등)의 경우
3. 사용설명서의 주의사항을 지키지 않아서 고장난 경우
4. 소비자가 임의로 수리, 분해, 개조하거나 취급 부주의로 고장난 경우
5. 판매처에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하거나 이동중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 경우
6. 본 보증서를 제시하지 않거나 구매일이 없을 경우
 - 1) 보증서는 재발행되지 않으니 분실하지 않도록 보관하여 주십시오
 - 2) 보증서는 구매한 판매점 또는 당사에 의뢰 하십시오
 - 3) 이 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.
7. 가정용 이외(업소, 업무 용) 용도로 사용한 경우
8. 충전기 및 소모품
9. 화재/지진/수해/낙뢰/ 그 외의 천재지변에 의한 고장인 경우

제품규격

제 품 명 : Hot & Cool Sonic	모 델 명 : reevaa S
본 체 크 기 : 42(L) x 65(W) x 179(H) mm	본 체 무 게 : 207g
충 전 시 간 : 최대 5시간	전 원 : 3.6V 2600mA 리튬 이온 배터리

- 본 제품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 충전기는 제조사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 충전 및 사용시간은 주변 환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

제 조 원 : (주)일우전자

판 매 원 : (주)리바

경기도 부천시 부일로205번길 46 (상동) 월타운 2층 204-109호

고 객 센 터 : 02-839-2011 <https://www.reevaa.co.kr>

Contact for more information. Copyright©2019 리바. All rights reserved

reevaa

고객서비스 : 02.839.2011
www.reevaa.co.kr



· 인증번호 : MSIP-REM-PM4-reevaaS
· 제품명 : Hot & Cool Sonic
· 모델명 : reevaa S
· 제조년월 : 별도표기
· 제조원/판매원 : (주)일우전자/(주)리바
· 원산지 : 대한민국