


reevaa 

| user  Manual



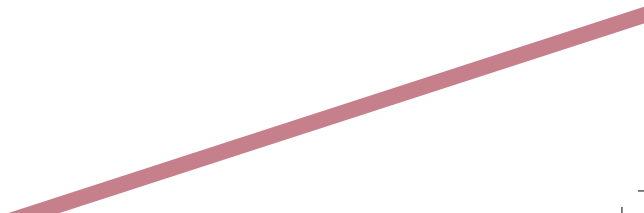

reevaa Brand Story

常に美しい肌を持ち続けることはできないのか？
シミとトラブルなしにきれいな肌を持つことはできないのか？リバは悩み、
研究しました。

リバは、肌のトーンを改善し弾力を整えようとする、化粧品の有効成分を肌の中
に深く浸透させなければならないということに、焦点を置きました

そして、リバは世界最初で温熱と超音波イオンを同時に発生させて
効果を最大化できる製品を作りました。

また、一つのヘッドで冷却マッサージまで実現できる機器を開発しました。

もう一度生まれ変わる美しさを自分にプレゼントしてください。

本製品を購入していただき誠にありがとうございます。
本製品を安全で正確に使用するために、使用前に十分に理解した上でご使用ください。
取扱説明書を読み終えた後には、いつでも見られる場所に保管してください。

製品名: reevaa s

各部分の名称

グラウンド

ヘッド

構成



本体



充電器(マイクロ5ピン)



取扱説明書

状態 LED

温熱は赤色、冷却マッサージは青色に点灯します。

イオンモード

ガルバニックイオンが作動する時点灯します。

超音波モード

超音波 3MHz(1秒に 300万回)が作動する時点灯します。

CLEAN モード

イオンと温熱効果で老廃物除去、肌の弾力増進と肌トーン改善、血液循環

NUTRITION モード

超音波とイオン、温熱効果で機能性化粧品を浸透させメラニン色素を破壊、ホホワイトニング効果

LIFTING モード

イオンと冷却マッサージ効果で肌のリフティングと弾力改善

多機能ボタン (電源 ON/OFF、モード選択)

電源をon/off でき、3種モードを選択できる多機能ボタンです。

レベル選択ボタン/LED

各機能の強、中、弱を選択します。

充電状態 LED

現在のバッテリーの充電状態が分かります。充電中はオレンジ色、充電完了には緑色に点灯します。

充電ソケット

携帯電話充電器のようなマイクロ 5ピンで充電します。

3. LIFTING モード(COOL & +イオン & -イオン)



2秒 > 2回クリック

- ① ヘッドにセロムを適量塗り電源(MODE)ボタンを2秒程度押して電源をつけた状態で2回さらに押せば青色のLEDに変わりION、LIFTINGにもLED LAMPが点灯します。



- ② LEVEL ボタンで '強/中/弱' を選択します。この時、温度とイオンが選択LEVELによって一緒に調節されます。(敏感肌は '弱(LOW)' を選択してください。)



- ③ 絵と同じようにマッサージします。使用時間は10分程度です。(12分後に自動で動作がOFFになります。)



Clean Nutrition Lifting
Hot&Cool
Skin rejuvenating massager

| 安全のための注意事項 - 超音波器械の過度な使用は健康を損なうことがあります。

1. 機器を使った後、水分が残っていましたら、完全に拭き取り、乾燥してから保管してください。
2. プラグをコンセントから外す時、コードを引っばらないでください。
3. ヘッドについた異物はすぐにきれいに拭いて、高温を避け保管してください。
4. 故障や非正常的な反応が発生する場合、使用を直ちに中止してください。
5. ペースメーカー、酸素供給機器、心電計など医療電子装備と共に使用しないでください
6. 機器及びコードに重い物を乗せないでください。
7. 機器に衝撃を与えたり投げたりしないでください。

★ こんな肌に使ってください！

- 化粧品が乗らない感じがする肌
- 乾燥でくたびれた肌
- 色ムラのある肌
- しっとり感を持続できる保湿が必要な肌
- 弾力が落ちてますます垂れてくる肌
- 肌が暗くなり化粧をしても明るくならない肌


★ こんな方たちは使わないでください。

- 肌からの出血や皮膚疾患、またはアレルギーがある方
- 使用部位に手術跡、傷あるいは炎症がある方
- 高血圧の症状、血友病及び心臓疾患、生理中の方
- 妊婦
- 体内埋め込み型医療機器、人工心臓などの生命維持電気機器、心電計などの装着型医療用電気機器などを使う方
- お子様や年配の方は一人で直接使わないようにしてください。

※ 購入直後にはバッテリーが放電し効果が落ちる可能性がありますので、完全に充電した後使ってください。

| 청소 및 보관방법

1. 風通しがよく、湿気のない化学成分を含んだ物のない所に保管してください。
2. 湿度が高くなく直射日光の当たらない所に保管してください。
3. 推奨保管温度 5~35℃、推奨保管湿度 20~80%

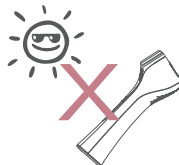

I A/S 保証書

▶ 製品名 : reevaa s

▶ 保証期間 : 購入日から 1 年

▶ 購入日 : 年 月 日 (購入日を必ず書いて下さい。購入日が未記載の場合、無効になる可能性があります)

▶ 仕入先 :

保証期間内に取扱説明書及び注意事項に基づき正常に使って故障になった場合、保証規定によって無料で修理させていただきます。
保証規定上、有料サービスにあたる場合は有料修理になります。

▶ 有料サービス : 保証期間中でも下記の場合、有料サービスになります。

1. 使用者の取り扱い不注意(落下、浸水、破損など)により故障が発生した場合。
2. 使用中に起きた外觀変化(スクラッチ、変色など)の場合。
3. 取り扱い書の注意事項を守らず、故障した場合。
4. 消費者が任意に修理、分解、改造したり、取り扱い不注意で故障した場合。
5. 販売店で提供してない別売品を一緒に使ったり移動中に製品を落として故障になったり損傷した場合。
6. 本保証書を提示しない、または購入日がない場合。
 - ① 保証書は再発行されないので紛失しないように保管してください。
 - ② 保証書は購入した販売店または当社に問い合わせてください。
 - ③ この保証書は大韓民国で適用されます。
7. 家庭用以外(店、業務用)用途で使った場合。
8. 充電器及び消耗品
9. 火災 / 地震 / 水害 / 落雷 / その他の自然災害による故障の場合。

| 製品規格

▶ 製品名 : reevaa s

▶ 本体大きさ : 42(L) x 65(W) x 179(H) mm

▶ 本体重さ : 207g

▶ 充電時間 : 最大 5 時間

▶ 電源 : リチウムイオンバッテリー

- 本製品は予告なしに変更されることがあります。
- 充電器は製造社の事情により変更されることがあります。
- 充電及び使用時間は周辺環境によって差異が発生することがあります。





カスタマーサービス : +82 2 839 2011
www.reevaa.co.kr