


reevaa 

| user  Manual



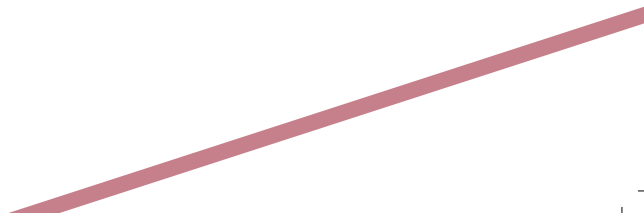

reevaa Brand Story



有没有一直保持漂亮皮肤？
有没有方法祛除瑕疵和烦恼有一个干净的皮肤？
Reevaa 苦思后研究了。

Reevaa改善肤色，唤醒弹性重点放在把化妆品的有效成分
深深地渗透皮肤里。

所以，Reevaa在全世界第一时间内创造出了同时产生热离子和
超声波达到最大限度的效果。
还有已经开发出用一个头实现冷按摩的设备。

现在把重生的美丽献给自己吧。

衷心感谢购买此产品。
为安全和正确使用本产品，请仔细阅读后使用。
阅读使用说明书后，请保管在随时可见的地方。

产品名：reevaa S

各部分名称



组件



本体



充电器(微5针)



使用说明书

状态 LED

热温是红色, 冷按摩为蓝色灯点亮。

离子模式

电离子工作时点亮。

超音波模式

音波3MHz (1秒为300万次) 工作时点亮。

CLEAN

锂离子排除废弃物, 改善皮肤色及美白有助于血液循环。

NUTRITION

超声波和锂离子及热温效果使功能性化妆品渗透到皮肤消灭黑色素及起美白效果。

LIFTING

锂离子和冷按摩效果来改善皮肤弹力和提起。

多功能按钮 (电源开/关, 模式选择)

打开并关闭电源, 可以选择三种模式的多功能按钮。

等级选择按钮/LED

可选择各个功能的强, 中, 弱。

充电状态 LED

显示当前电池的充电状态。充电时显示橙色, 充电完时将以绿色点亮。
(当小于30%时以红色点亮)

充电插座

如移动充电电话充电器一样用微5针。

1. CLEAN (热温和+锂离子)



① 按下电源(模式)按钮约2秒钟, 状态LED亮为红色, 清洁, 锂离子LED灯都点亮。



② 等级按钮来选'强/中/弱'此时, 热温和锂离子根据等级级别被调整。敏感皮肤请选择弱等级。



③ 如图所示做清洁。脸上总用时间约为10分钟。(12分钟以后电源将自动切断)

2. NUTRITION (热温和音波及负锂离子)



① 在头部适当摸维生素C系列 凝胶或血清后按2秒左右电源按钮打开电源的情况下在按一次, 红色LED和锂离子, 音波, 滋润的LED灯点亮。



② 用等级按钮来选'强/中/弱'。此时, 热温和锂离子及超音波根据等级被调整。敏感皮肤请选择使用弱等级。



③ 如图所示, 不要停留在一个地方, 需要移动按摩。适当的时间是大约10分钟左右。12分钟以后电源将自动切断。

3. LIFTING (冷和正负锂离子)



2秒 > 按2次

- 1 在头部适当摸血清后按2秒左右电源按钮，打开电源的情况下在按两次，蓝色LED灯点亮此时，音波和提起LED也点亮。



- 2 等级级别按钮来选‘强/中/弱。此时，热温和锂离子及超音波根据等级被调整。
(敏感皮肤请选择弱等级。)



- 3 如图所示做按摩。
适当的时间是大约10分钟左右。
(12分钟以后电源将自动切断。)



Clean Nutrition Lifting
Hot&Cool
Skin rejuvenating massager

| 安全注意事项 - 过度使用超声波设备可能会危害健康。

1. 如使用设备后有剩余的水, 请把水擦干净后在保持干燥后保管。
2. 插座上拔下插头时不要拉电线。
3. 请把头部上的异物擦干净后, 请远离高温保管。
4. 如出现故障或异常反应发生时, 请立即停止使用。
5. 不能跟心脏起搏器, 供氧气机, 心电图等医疗电子设备混合使用。
6. 请勿将设备和头部上放置物质。
7. 避免对设备的冲击及乱扔。
8. 为电池寿命及放电保护, 大约每6个月充电一次。
9. 设备的充电电池保修6个月。

★ 请使用在这种皮肤

- 感觉化妆品不容易吸收的皮肤
- 干燥及疲惫的皮肤
- 彩色鲜艳的皮肤
- 需要持续 保湿, 滋润的皮肤
- 缺乏弹力和越来越衰退的皮肤
- 暗沉肌肤, 即使化妆也没有光亮皮肤


★ 这些人请不要使用

- 皮肤出血及皮肤疾病患者或过敏者
- 使用部位动过手术或有受伤有炎症的患者
- 有高血压症状, 血友病及心脏疾病患者, 在生理当中者
- 怀孕者
- 体内使用嵌入式医疗设备, 如人工心肺等生命支持用电子设备。如心电图等使用其它医疗安装设备患者
- 小孩子和老年人请不要直接使用

※ 因您第一次购买设备时因设备放电, 效果将会降低请完全充电后使用。

| 清洗与贮存方法

1. 请保管在无潮湿, 无有害化学成分及通风良好的地方。
2. 请保管在避免直射光或湿度低的地方。
3. 建议消费者存储温度在 5~35°C, 湿度20%至80%。

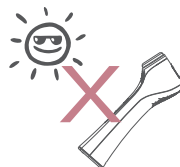

| A/S 保修卡

▶ 产品名称: reevaa s

▶ 保修期间: 自购买之日起 一年

▶ 购买日: 年 月 日 (请务必写好购买日期。未写好购买日期可能会无效。)

▶ 购买地点:

保修期间内按使用说明书及注意事项正常使用而发生故障时按照保修条款免费维修。
超过保修期间时, 收费维修费用。

▶ 付费服务: 即使在保修期间内, 下列情况下收取服务费用。

1. 如故障引起在用户的勿操作 (滴液, 水, 破坏等)。
2. 在使用当中发生的外部变动 (划痕, 变色等) 的情况下。
3. 没有遵守使用说明书发生故障时。
4. 消费者随意拆解, 维修, 改造及疏忽而发生处理不当的情况。
5. 使用经销商未提供的其它用品及移动当中发生损坏及发生故障时。
6. 未提出本保证书及未标记购买日时。
 - ① 请不要丢失保证书, 从未补发保证书。
 - ② 关于保证书请问购买零售商或本公司。
 - ③ 此保证书仅适用于韩国。
7. 使用在家庭用以外 (商业, 商务) 的目的。
8. 充电器及消耗品。
9. 火灾/地震/洪水/雷击/其它自然灾害引起的故障。

| 产品规格

▶ 产品名称: reevaa s

▶ 外形尺寸: 42(L) x 65(W) x 179(H) mm

▶ 总量: 207克

▶ 充电时间: 最多5小时

▶ 电源: 锂离子电池

- 本产品可随时更改, 另不通知。
- 充电器根据制造商的情况下可被改变。
- 充电和使用时间根据周围环境有所变化。





咨询 : +82 2 839 2011
www.reevaa.co.kr